


Hvordan ser hjemmetesten ud?

Evalyn® børsten er ca. 20 cm lang og består af et gennemsigtigt, rørformet indføringshylster med vinger. Inde i hylsteret løber et lyserødt skaft med et lyserødt stempel i den ene ende og en hvid børste i den anden.

I børsteenden sidder en lyserød, trekantet hætte fast på hylsteret. Når man fjerner hættten kan den hvide børste skubbes ud af hylsteret ved at presse det lyserøde stempel ind mod hylsterets kant.

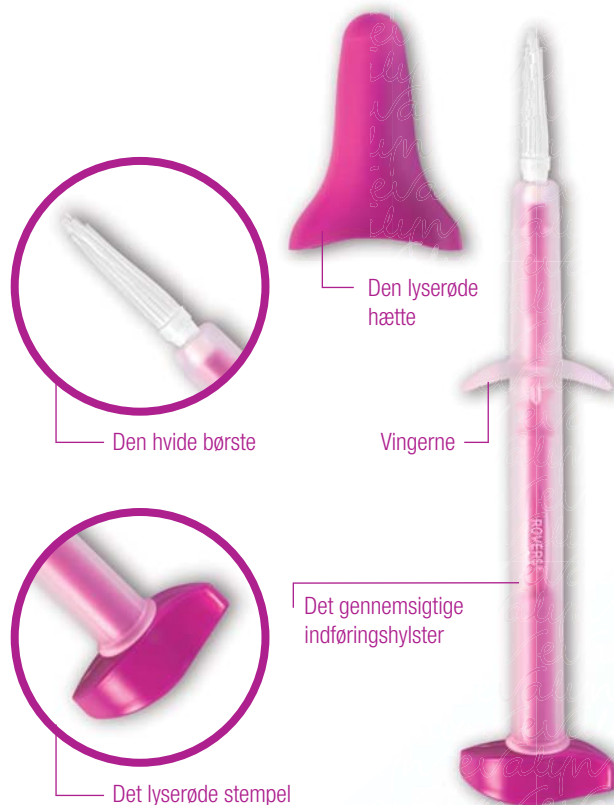

Hvorfor bruge Evalyn® børsten?

Evalyn® børsten er udviklet med det ene formål at udtage cellemateriale fra skeden. Evalyn® børsten er udstyret med et børstehoved bestående af fine, bløde fibre, som sikrer at du får cellemateriale nok med.

Rovers Medical Devices

Rovers Medical Devices har specialiseret sig i at udvikle redskaber til udtagning af celleprøver til brug i medicinsk forskning. Redskabernes brugssikkerhed og pålidelighed garanteres gennem Rovers mangeårige erfaring i udvikling, forskning og produktion af produkter til medicinsk forskning. Rovers® Cervexbørste® – som er kendt verden over pga. dens innovative pode-pind' er en del af Rovers Medical Devices' produktportefølje.

evalyn®brush

Brugervejledning til HPV hjemmetesten

Version RF Evafid-2014-02-DK



Producent: Rovers Medical Devices BV
Lekstraat 10, 5347 KV Oss, Nederlandene
Tlf.: +31 412 648870
Fax: +31 412 623835
E-mail: info@roversmedicaldevices.com
Hjemmeside: www.roversmedicaldevices.com



Rovers® Evalyn® børsten er et patenteret produkt og et registreret design.

Rovers® og Evalyn® er registrerede varemærker, der ejes af Rovers Medical Devices B.V.

Oss, Nederlandene.

© Rovers Medical Devices B.V.



CE 0044

STERILE EO

Evalyn® børsten

Evalyn® børsten er et specialfremstillet, sterilt redskab til at udtage celleprøver til HPV screening hjemmefra. Ved hjælp af Evalyn® børsten kan du selv nemt og smertefrit udtage cellemateriale fra livmoderhalsen. Dette cellemateriale skal efterfølgende analyseres hos et professionelt laboratorium.

Vigtige oplysninger


- Brug ikke Evalyn® børsten hvis emballagen er beskadiget eller hvis udløbsdatoen er overskredet.
- Brug ikke børsten mens du har menstruation.
- Brug ikke børsten hvis du er gravid, eller i tre måneder efter endt graviditet.
- Undgå andre vaginale produkter i mindst to dage op til brug af børsten. Præventionsmidler til kvinder, kondomer og vandbaserede glidecremer kan bruges som normalt.
- Må kun bruges en gang!
- Genbrug af børsten kan medføre infektioner og/eller forkert diagnose.

Nemt, sikkert og pålideligt


Denne vejledning gælder for brugen af Evalyn® børsten.




1. Vask dine hænder før du bruger børsten

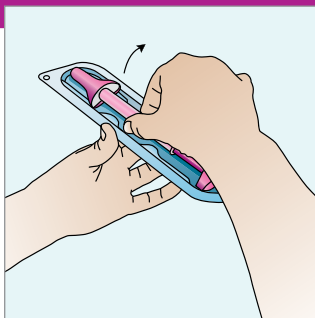


2. Tag Evalyn® børsten ud af indpakningen. Smid ikke den tomme emballage ud, du skal bruge den til at sende Evalyn® børsten tilbage til laboratoriet når du har taget prøven.

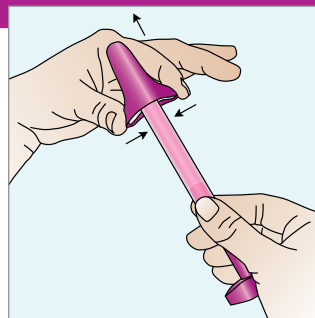


3. Pres ind på siderne af den lyserøde hætte med tommel- og pegefingre for at fjerne hættens. Vær forsigtig ikke at røre ved de hvide børstefibre med dine hænder!

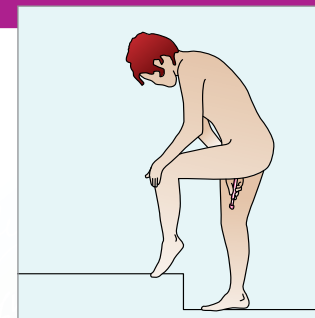


4. Tag prøven stående. Stil dig så behageligt som muligt, som for eksempel når du skal indføre en tampon.

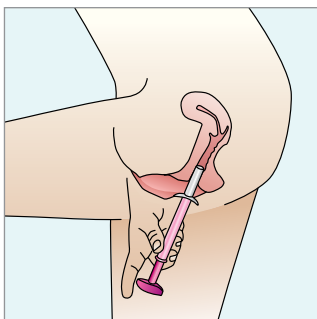


5. Spred kønslæberne med en hånd mens du indfører Evalyn® børsten i skeden med den anden hånd. Før børsten så langt ind, at vingerne støder mod dine kønslæber.

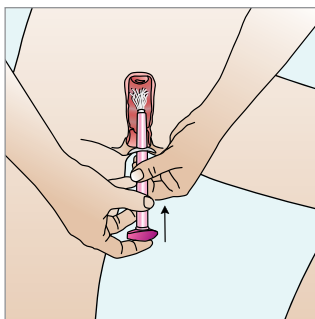


6. Hold fast i det gennemsigtige hylster med en hånd og tryk det lyserøde stempel ind med den anden. Du vil høre og mærke et klik når børsten når den rette position og stemplet falder i hak på hylsterets kant.

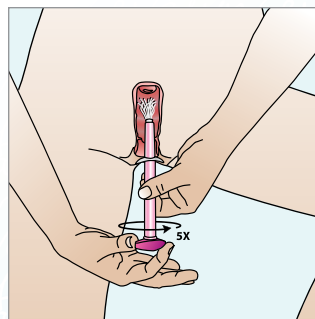


7. Drej det lyserøde stempel helt rundt fem gange i samme retning. Ved hver hele rotation vil du høre et klik. Når der er foretaget fem omdrejninger, fjernes Evalyn® børsten forsigtigt fra skeden.

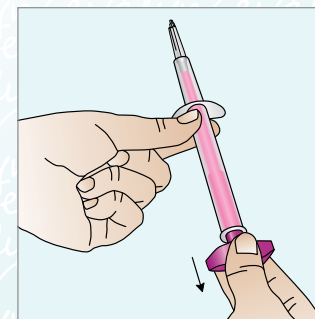


8. Hold fast i det gennemsigtige hylster med den ene hånd, og træk det lyserøde stempel tilbage med den anden hånd, indtil børsten forsvinder ned i røret. Vær forsigtig ikke at røre ved Evalyn® børstens øverste område, ovenfor vingerne.

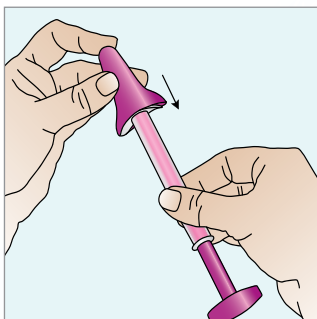


9. Hold fast i det gennemsigtige hylster så børstedelen ikke springer frem igen. Sæt den lyserøde hætte tilbage på Evalyn® børsten med tommel- og pegefingre. Du vil høre et klik når hættens er kommet ordentligt på plads.

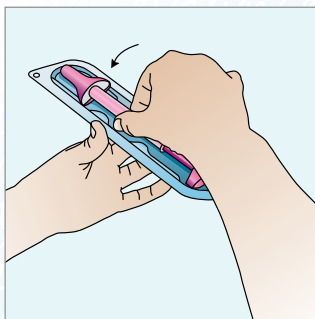

10. Læg Evalyn® børsten tilbage i den originale indpakning.

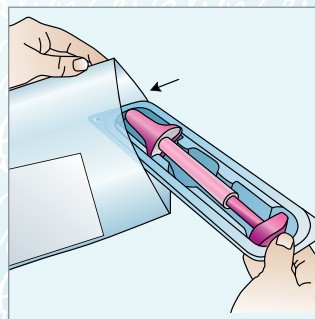

11. Læg pakken med Evalyn® børsten ind i den plastikpose, der blev leveret sammen med Evalyn® børsten og luk posen.

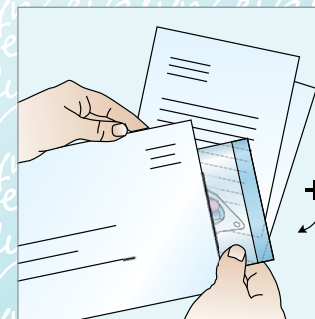

12. Brug svarkuverten til at sende plastikposen med Evalyn® børsten til laboratoriet.